

『工房 オアシス』の活動

作業療法士
遠藤 美代子
大谷 芙美子



工房開設のあらまし

- ◆「ちょっと使いにくいなあ・・・」・「ここがこうだったらなあ・・・」という利用者さんの想いや、私たちの想いを簡単な工夫で実現できないかと考えていました。
- ◆簡単なことではありますが、このことで利用者さんたちに「よかった」・「できた」などど想っていただけたらと思います。
- ◆利用者さんにとってオアシスのような存在でありたいと思います。



作品介绍①—スプーン



【長所】

- ◆ 柄の部分お湯にて変形可能

【短所】

- ◆ 重い
- ◆ 大きい
- ◆ 加工に手間がかかる

施設で購入 ￥3,150



柄を曲げるなら・・・

～100円均一のスプーン～




【長所】

- ◆ 柄が上下左右に加工しやすい
- ◆ 軽い

【短所】

- ◆ 購入場所が統一されにくい

2本もしくは3本で¥100

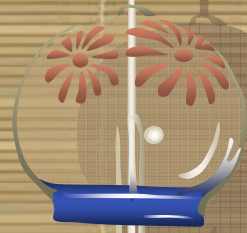

柄を太くするなら・・・ ～スポンジ板～



【長所】

- ◆ 太さ・長さを調節可能
- ◆ 加工が簡単
- ◆ 衛生的
- ◆ 軽い
- ◆ 安い
- ◆ いろんな握りに対応できる

【短所】

- ◆ 今のところなし

値段はA3で¥700程度
ひとつ分 約¥50



太柄で曲ったスプーンを作る

～100均スプーン+スポンジ板～



- ◆ すくいやすい角度や
口に入れやすい角度
に加工
- ◆ 角度はその場で加工
可能

一本 ¥100程度



カフタイプにするなら・・・



【長所】

- ◆ 軽い
- ◆ 衛生的
- ◆ 伸縮性があり、どんなものにも対応可能
- ◆ ジャスコなどで購入可能(¥500)

【短所】

- ◆ 外して洗い、その都度調整必要



いろんなタイプのスプーンたち



すべて100均

材質:プラスチック

- ◆ 上: 角度付き。
握りやすい形状
左右のタイプあり
- ◆ 中: 口に入れる部分
が小さい。
- ◆ 下: スプーンフォーク
さしやすい
握りやすい形状



作品介绍②一杖置き



立てかける



床に置く



椅子に掛ける

【通所での一場面】

杖の置き場所が無く、いろんな所に置く。

この杖に足を掛け転倒しそうになる



杖置き ー①



◆ 材料
ペットボトル(水)
ビニールテープ
結束帯



使用方法



杖を上を持ち上げて
入れる

【短所】

- ◆ 上に振り上げるため
動作が大きくなる
(立位で行うと転倒の
危険性がある)
- ◆ 水のペットボトルは壊
れやすい



改良品・・・切れ込みを入れる お茶のペットボトル使用



【長所】

- ◆ 杖の出し入れを上下ではなく、平行移動で行える
- ◆ 丈夫

【短所】

- ◆ 切れ込みの角が鋭利
- ◆ 切れ込みが分かりにくい

改良品一② より安全に・・・




- ◆ 切れ込みにテープを貼る
- ◆ 角を丸くする



- ◆ 切れ込みが目立つよう黄色いテープを貼る



使用方法

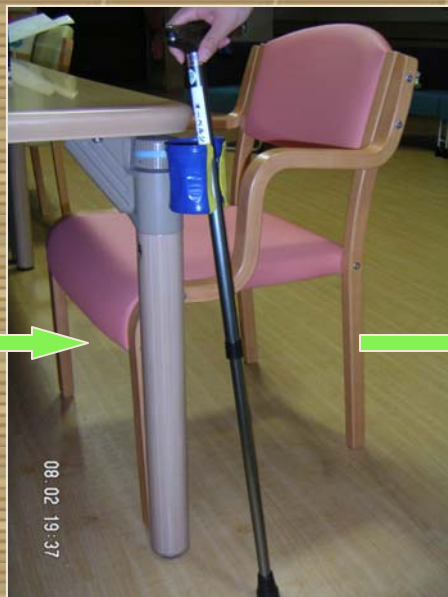

1: 机に取り付ける

2: 杖を横から入れる

【長所】

平行移動で出し入れが行える




その他の作品・・① 補高靴



◆ かかと部分をさらに補高

◆ 材料
プラスチック板（黒）

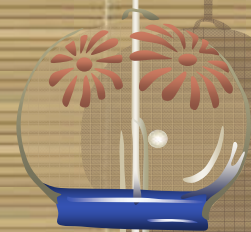

その他の作品・・・② 座面シート



- ◆ 座面のゆがみを埋める
- ◆ 材料：ダンボール
布テープ

